




PrinterArchiv

Вспомогательный софтвер
Для паровых стерилизаторов BMT

Универсальная архивация
протоколов о стерилизации

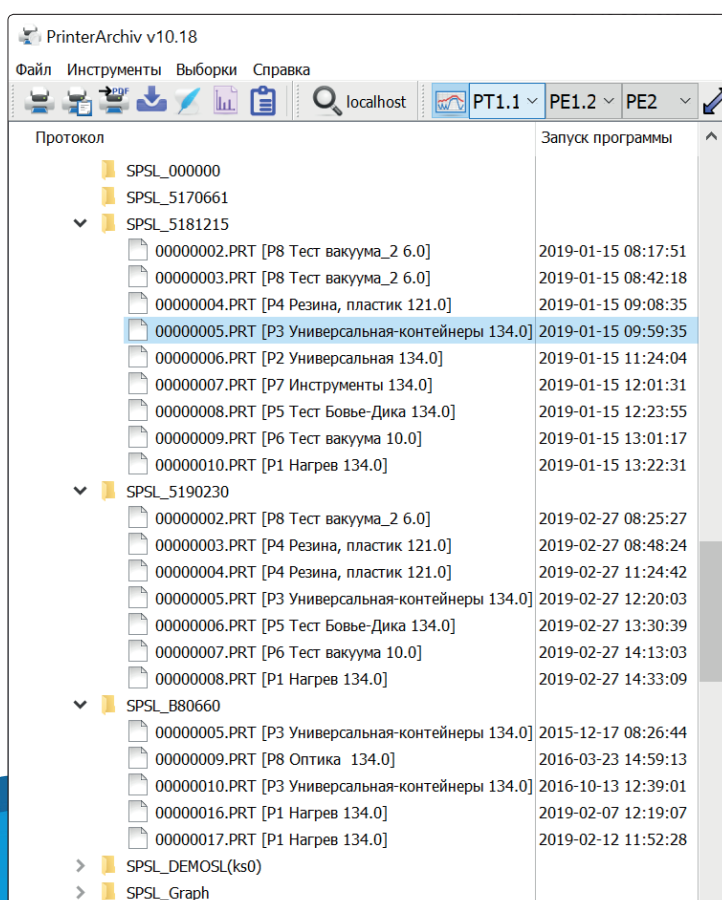

охраняем здоровье людей

Коммуникационный софтwer PrinterArchiv для паровых стерилизаторов BMT

PrinterArchiv - аппаратный софтвер разработанный для универсальной архивации протоколов о стерилизации паровых стерилизаторов в ПК.

PrinterArchiv - позволяет не только при помощи к стерилизатору добавленного принтера, но также и подключением к Вашему ПК, архивировать и в дальнейшем работать с протоколами о стерилизации.


PrinterArchiv - является рациональным и значимым решением для центрального мониторинга и записи данных о стерилизации на вашем рабочем месте.

PrinterArchiv - позволяет далее экспортировать данные в формат PDF или CSV для дальнейшей обработки. Аппараты, позволяющие подключить USB флеш диск, таким образом позволяют экспортировать протоколы в нативном формате ПринтерАрхив, который следом позволяет дальнейшую работу с данными в ПринтерАрхиве. Касательно аппаратов STERIVAP® и UNISTERI® ПринтерАрхив сверх того способствует посредством e-мэйл коммуникации пересылать предупреждения о только законченной стерилизации, ошибках в течение процесса и других.

У аппаратов типа STERIVAP® и UNISTERI® кроме того позволяет контролировать целостность данных.

PrinterArchiv - включается немедленно после включения системы, не нужен логин обслуживающего персонала.

PrinterArchiv - возможно немедленно подключить самостоятельным кабелем к паровым стерилизаторам без каких-либо обработок аппаратов (интерфейс RS232, USB или Ethernet). Програмное обеспечение является оснащением по выбору для всех этих аппаратов.

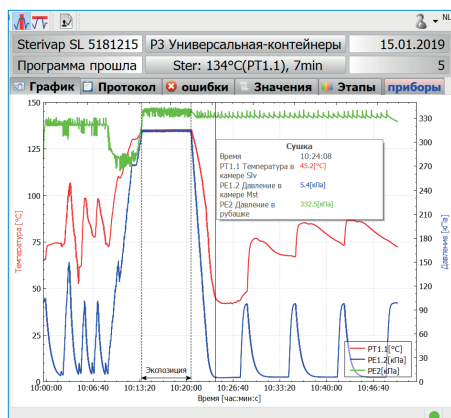


- несложное обслуживание
- операционная система Windows
- простое управление
- центральный мониторинг и запись данных о стерилизации
- возможная подробная работа с графиком, возможно его переместить или сдвинуть
- количество подключенных приборов подчиненно выбору интерфейса, или количеству свободных серийных портов в ПК
- возможное пользовательское исправление заказной системы

- автоматическая синхронизация протоколов с ПК

Минимальные системные требования

- операционная система Windows 7, Windows 8 или Windows 10
- ethernet, USB или RS232
- системная память 1ГБ
- свободное место на жестком диске 4ГБ

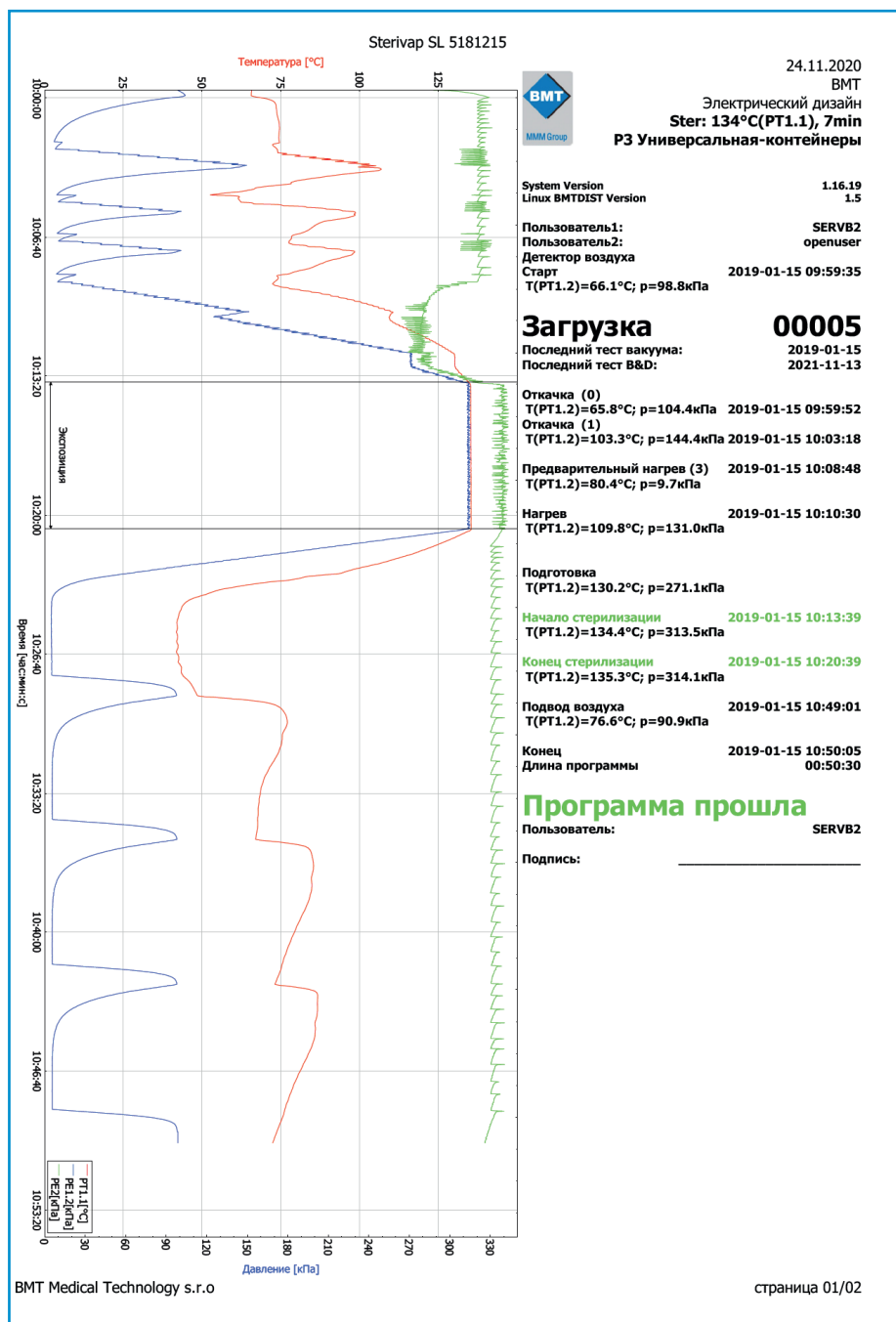

BMT Medical Technology s.r.o.

страница 01/02



BMT Medical Technology, s.r.o.,
Cejl 157/50, Zábřdovice,
CZ 602 00 Brno
Tel.: +420 545 537 111
fax: +420 545 211 750
e-mail: mail@bmt.cz
www.bmt.cz,
youtube.com/bmtbrno,
facebook.com/bmt.cz

ООО «BMT-MMM»
Московский офис
тел. +7 (495) 783-86-87,
783-86-88,
783-86-89
119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 23

ООО «BMT-MMM»
Новосибирский филиал
тел. +7 (3832) 23-95-60,
22-31-74
630007, г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, д. 42, офис 223

ООО «BMT-MMM»
Ставропольский филиал
тел. +7 (8652) 23-71-72
355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-кт. Кулакова,
д. 10 «Д», оф. 209

ООО «BMT-MMM»
Санкт-Петербургский филиал
тел. +8 (812) 677-23-46
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В
БЦ «Гайот», оф. 102